



Használati útmutató

**Nagy intenzitású újratölthető professzionális
kézi masszírozógép
(Hand Massager)
LG-818.**

Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat.

Ez a KÉZI MASSZÍROZÓGÉP a maga 5 masszírozó felületével egy professzionális egészségügyi klubban végzett masszírozás érzetét kelti az otthon kényelmében.

Ez a KÉZI MASSZÍROZÓGÉP olyan tanulmányok és tervek alapján készült, amelyek biztosítják, hogy Ön jobban érezze magát: a készülék enyhíti a fáradtságot, lazítja a görcsös és fáradt, fájó izmokat; növeli a test energiáját és izomállapotát egyszerűen azáltal, hogy kiküszöböli a feszültséget és a stresszt az Ön testéből.

Ahhoz, hogy élvezhesse az Ön KÉZI MASSZÍROZÓGÉPÉT nem szükséges levenni a ruháit: a készülék hatása könnyen átjut a ruhán keresztül is a testre.

Azonban, ha Ön úgy kívánja, akkor a készüléket közvetlenül is alkalmazhatja a meztelen testére a kezeléshez.

A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP használata során soha ne alkalmazzon túl nagy nyomást. Szánjon időt a kezelésre és élvezze a masszírozást. Gyengéd, enyhítő mozgások alkalmazása ajánlatos.

A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP TÖLTÉSE

FONTOS: A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP első használata előtt helyezze a készüléket legalább 15 órán át a töltőre, ez a minimális idő, ami szükséges ahhoz, hogy az akkumulátorok teljesen feltöltődjenek. A további töltések rövidebbek lesznek attól függően, hogy milyen hosszú ideig használta a készüléket.

A teljesen feltöltött KÉZI MASSZÍROZÓGÉP legfeljebb 45 percig működik (ez az idő rövidebb, ha a készüléket csak a MAGAS teljesítmény fokozaton használjuk).

Az akkumulátorok károsodásának megelőzése céljára ne töltsse a KÉZI MASSZÍROZÓGÉPet, amikor a hőmérséklet 5°C (41°F) alatt vagy 40°C (105°F) felett van.

1. A töltés előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati KI (OFF) állásban van-e.
2. Dugja a töltőzsinór végén lévő dugaszt a masszírozógép fogantyújának alján lévő hüvelybe. (Lásd „A”-ábra).
3. Dugaszolja a töltőt az elektromos hálózati csatlakozóba (lásd „B”-ábra). Előtte ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a töltőn látható értéknek.
4. Ha a masszírozógép helyesen van a töltőre helyezve, akkor a jelzőlámpa világít.
5. A töltés befejeztével a készülék csatlakozóját mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból.

A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP töltésére legalkalmasabb időszak az éjszaka.

A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP HASZNÁLATA

1. Először ellenőrizze, hogy a fő egység töltött állapotban van-e. Ha nincs, kövesse a fent ismertetett eljárást.
2. A masszírozógép működtetéséhez tolja a fogantyún lévő kapcsolót BE (ON) ÉS KI (OFF) állásba és a masszírozás erősségének kiválasztásához az ERŐS (HIGH) vagy GYENGE (LOW) állásba.
3. A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP az egyenes helyzetből különféle szöghelyzetekbe állítható. A masszírozógép erőátviteli fej szöghelyzetének a megváltoztatásához egyik kezével tartsa meg szilárdan a fogantyút és a másik kezével fordítsa el a fejet, amíg eléri a kívánt szöghelyzetet (lásd „C”-ÁBRA). A fej forgatását lassan végezze. Ne próbálja a forgatást tovább erőltetni az ütközési ponton túl.
4. Ajánlatos a masszírozógépet kezdetben 5-10 percig használni,

mérsékelt növeléssel. Semmi esetre sem használja a masszírozógépet 15 percnél tovább a testnek ugyanazon területén.

5. Ha befejezte a KÉZI MASSZÍROZÓGÉP használatát, soha ne feledje a készüléket kikapcsolni (OFF) és a töltőre helyezni.
6. Használat után tárolja a készüléket biztonságos, száraz és hűvös helyen.
7. 1. ábra - Ujjhegy masszírozás: a rezgő mini-ujjak enyhítő, bizsergő, vibráló érzetet keltenek.
8. 2. ábra - Izomlazító: masszírozó barázdás felület, ami segít enyhíteni a fáradt, fájó izmokat.
9. 3. ábra - Rezgő markoló: döntött, rezgő felület, ami kényelmesen illeszkedik a test körvonalához.
10. 4. ábra - Sima pulzátor: erős, állandó, ritmikus masszírozás, ami enyhítő érzés keltésével feloldja a feszültséget.
11. 5. ábra - Test körvonal: a lapos, kerekített felület ideális a test gyengéd masszírozására.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. A KÉZI MASSZÍROZÓGÉPhez adott töltőt speciálisan ehhez a készülékhez terveztük.
Másfajta töltő használata nem ajánlatos. Meghibásodás esetén a töltőt csak eredetivel szabad pótolni.
2. Kerülje el a készülék leejtését, mert ez a belső alkatrészek károsodását okozhatja.
3. A masszírozógép tisztítása előtt mindig húzza ki a töltő csatlakozóját.
4. Az egység tisztításához soha ne használjon folyadékot vagy dörzshatású tisztítószereket.
Egy darab megnedvesített ruha elegendő.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

OLVASSA EL GONDOSAN A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

1. Ne használja a masszírozógépet a test alábbi területein:
 - A test bármely duzzadt, égett vagy begyulladt felületén, vagy ahol bőrön kiütések vagy fekélyes sebek találhatóak.
 - A test bármely érzéstelenített területén, hacsak az orvosa ezt jóvá nem hagyta.
 - Hasüreg, ha fájdalom van jelen.
 - Viszeres lábak.
 - Érzékeny nemiszervi szövetek.
 - A nyak jobb vagy bal oldalán a nyaki ütőereken vagy azok közelében.
2. Cukorbetegség vagy állapotos nők a készülék használata előtt konzultáljanak orvosukkal.
3. A masszírozás legyen kellemes és kényelmes. Ha fájdalom, vagy kellemetlen érzés keletkezik, hagyja abba a használatot és konzultáljon orvosával.
4. Mielőtt a masszírozógépet a hálózati csatlakozóra csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a beállítólapra látható feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
5. Tartsa távol a készüléket a gyermekektől. Gyermekek vagy rokkant személyek közelében, általuk vagy rajtuk történő használat esetén szigorú felügyelet szükséges.
6. Ne használja a készüléket fürdés közben vagy hasonló körülmények között. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahonnan beleeshet vagy beránthat a kádba, mosdóba vagy hasonló helyekre. Ne tegye, vagy ne ejtse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
7. Ha a készülék vízbe esett, ne nyúljon hozzá; először húzza ki a csatlakozó dugóját.
8. A túlmelegedés elkerülésére ne használja a készüléket takaró vagy párna alatt.
9. Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, ha a hálózati zsinórja vagy a dugója sérült és/vagy ha a terméket leejtette, vagy ha a vízbe esett.

10. Ne hordozza a készüléket a hálózati zsinórjánál fogva vagy ne használja a zsinórt fogantyúként.
11. Tartsa a készüléket és a zsinórját távol a forró felületektől.
12. Soha ne működtesse a készüléket olyan lágy felületen, mint az ágy vagy a kanapé, ahol a levegőző nyílások elzáródhatnak. A nyílásokba ne jussanak foszlányok, haj vagy hasonló tárgyak.
13. Ne működtesse a készüléket, ahol aeroszol spray-eket használnak vagy ahol oxigén kezelés folyik.
14. Hibás működés esetén ne próbálkozzon a javítással; a javítás céljára vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizzel.
15. A masszírozógépet csak rendeltetésszerűen használja, a jelen használati utasításban foglaltaknak megfelelően.

TÖLTŐ SPECIFIKÁCIÓK

Bemenet: 230 V 50 Hz, Kimenet: 2,4 V =; 140 mA

Érintésvédelmi Osztály II.

KERMI engedély: E-2004/000741-1

E-2004/0007601-1


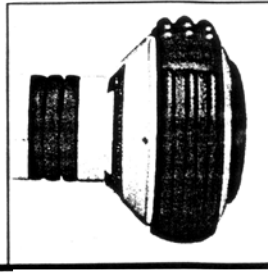


Fig.2

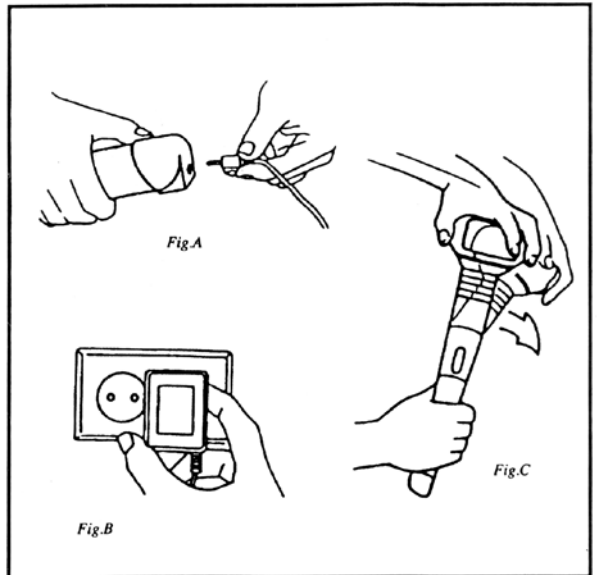

Importáló és Forgalmazó: **ZEPTEK International Ungarn Kft.**
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9–12.

Ügyfélfogadás helye és bemutatóterem: 1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 437-6633, 886-3104 • Fax: 333-1930

Javítószolgálat neve és címe: **ZEPTEK Szerviz**
1044 Budapest, Megyeri út 51.
Tel.: 233-0885, 435-7085, 435-7086 • Fax: 435-7084